

Mous.

LAVOMER

ラボマー

**取扱説明書（保証書付）**

このたびは、ラボマーをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。




ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。

本製品を他の人に貸与・譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。



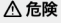

## 安全上のご注意


●この製品を安全に正しくご使用していただく為に、ご使用前に必ず[安全上のご注意]をよくお読みになり十分に理解してください。●お読みになった後はいつも手元においてご使用ください。●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

 <b>危険</b>	守らないと生命や身体に重大な被害を負うことが想定される内容
 <b>警告</b>	守らないと生命や身体に重大な被害が発生することが想定される内容
 <b>注意</b>	守らないと軽傷程度の被害または物損事故の発生が想定される内容


### 図記号の例



	この記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、近くに文章で示します。
	この記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は、近くに文章で示します。

### △ 危険


	●誤作動を招くおそれがありますので、下記のような医療用電子機器との併用はしないでください。①ペースメーカーなどの体内植込み型医療用電子機器②人工心臓などの生命維持用電子医療機器③心電計などの装着型の医療用電子機器●入浴中や浴室など湿度の高い所ではご使用にならないでください。強い電気ショックを受ける、火傷、感電の原因となります。●指定以外の誤った使い方でご使用にならないでください。怪我や感電の原因となります。
---	---

### △ 警告

	<p>次のような人または部位には、絶対にご使用にならないでください。事故やトラブルの原因となります。</p> <p>&lt;人&gt;</p> <p>●日焼けなどで肌の色が黒い人●心臓に疾患がある人●医師の治療を受けている人●急性疾患・有熱性疾患・感染性疾患・結核性疾患の人●顔面神経痛の人●てんかんの人●光の点滅で気分が悪くなる人●ケロイド体質の人●その他体調のすぐれない人（37度以上の熱があるとき・血圧に異常があるとき・頭痛のあるとき）●皮膚に異常がある人（アトピー性皮膚炎の人・アレルギー体質で特に肌が敏感な人・化粧品による皮膚炎を起こしている人・過度の日焼けで肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしている人・ニキビが化膿し（黄ニキビ）炎症を起こしている人・かゆみやほてりのあるシミや、病的な（内臓疾患などによる）シミのある人）●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で、毛細血管拡張を起こしている人●血友病患者●飲酒中や薬を服用中の人●疲労の激しい人●痛覚や知覚に障害のある人●自分で意思表示が出来ない人●乳幼児や18歳未満の人</p> <p>&lt;部位&gt;</p> <p>●ほくろ ●あざ ●濃いシミ ●眼球（上まぶた） ●耳 ●頭皮 ●傷口 ●悪性腫瘍 ●美容整形をした直後の部位 ●目の周り ●眉周り ●唇 ●首 ●腹部（女性のみ） ●外陰部 ●入れ墨、タトゥー、アートメイク ●メイクの上 ●髪 ●顔面黒皮症 ●肝斑 ●指定部位以外</p> <p>※通院中の方や妊娠中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。</p>
---	---


	電源を入れた状態で放置しないでください。
	他の電気製品（美容器など）との同時使用はしないでください。 感電や故障の原因となったり、体調不良を起こしたりするおそれがあります。
	修理、分解、改造は行わないでください。感電および異常作動により、身体に重大な被害を与えるおそれがあります。
	本体の作動などに異常（熱くなるやこげるようなにおいがするなど）を感じた場合は、直ちに電源を切り、コンセントからアダプターを抜いて、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
	照射後、24 時間（個人差あり）は皮膚を刺激するような日焼け、サウナ、肌にとびたりした服装、漂白剤、クリームなどは避けてください。肌のかゆみや赤みなどを引き起こす原因となります。
	心臓の上、陰部、皮膚疾患のある部位などにはご使用にならないでください。事故や体調不良を起こすおそれがあります。
	同一箇所に連続照射しないでください。火傷や怪我の原因となります。

### ⚠ 注意

	身体に異常（気分が悪くなったり痛みを感じたりする）や皮膚に発赤やかぶれなどの異常を感じた場合は、直ちにご使用を中止してください。事故や怪我の原因となります。
	本製品の上に重いものを置いたり、衝撃（高い所からの落下など）を与えたりしないでください。事故や故障の原因となります。
	破損した状態でご使用にならないでください。事故や故障の原因となります。
	お手入れをするときは、シンナー、アルコール、ベンジン、灯油などの溶剤、薬品類、磨（みがき）粉などはご使用にならないでください。変色や変形の原因となります。
	ご使用中に停電または雷が鳴りだしたら直ちにご使用を中止してください。事故や故障の原因となります。
	日本以外ではご使用にならないでください。事故や故障の原因となります。
	アダプタープラグ、コンセントプラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分なままでご使用すると、感電や発火の原因となります。
	指定された電源電圧以外の電圧でご使用にならないでください。感電や発火の原因となります。本製品のアダプターの入力電圧は AC 100～240V です。


	アダプターを傷つけたり、重い物を乗せたり、はさみ込んだり、加工したりしないでください。発煙や発火の原因となります。
	アダプターコードを極端に折り曲げたり、引っ張ったり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたりしないでください。事故や故障の原因となります。
	交流 100V 以外の電源はご使用にならないでください。火災、事故、故障の原因となります。
	ご使用後は必ずコンセントからアダプターを抜いてください。事故や故障の原因となります。
	本製品は濡らしたり、水に浸けたり、水をかけたりしないでください。感電や故障の原因となります。
	専用のアダプター以外のご使用にならないでください。発熱、発煙、発火、故障、怪我の原因となります。
	ご使用前に本体に変形、割れ、破損が無いかご確認ください。事故や怪我の原因となります。
	落下時、破損時は直ちにご使用を中止してください。そのままご使用を続けると、発熱、発火、感電、怪我の原因となります。
	吸気口や排気口をふさいでご使用にならないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。
	濡れた手でご使用にならないでください。発熱、感電、故障などの原因となります。
	ストーブなどの暖房機器の近くでご使用や保管をしないでください。発熱や発火の原因となります。
	アダプタープラグを抜くときは、コードを持たず、必ずアダプタープラグをもって引き抜いてください。感電、ショート、発火の原因となります。
	お手入れの際は、必ずコンセントプラグを抜いてください。感電の原因となります。
	肌が濡れた状態でご使用にならないでください。感電の原因となります。
	ネックレスなどの金属装飾品をつけたままご使用にならないでください。事故や怪我の原因となります。
照射面が汚れていないか定期的に点検してください。火傷や故障の原因となります。	
乳首、乳輪、へそにはご使用にならないでください。火傷や怪我の原因となります。	
肌の色が変化した場合、ご使用を中止し、医師にご相談ください。	

△危険 必ずお守りください。(身体に重大な被害を負う内容。)

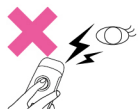

目に直接照射しないでください。

目を傷める原因となります。

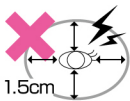

目の周り1.5cm以内は照射しないでください。

目を傷める原因となります。



照射後24時間程度は直射日光を避けてください。

肌を傷める原因となります。



お子様やペットの近くで照射しないでください。

事故や怪我の原因となります。



他人へ向けて照射しないでください。

事故や怪我の原因となります。



照射光を直接見しないでください。

目を傷める原因となります。



照射後、当日の入浴は避けてください。

肌を傷める原因となります。




他人に照射しないでください。

事故や怪我の原因となります。



暗い場所ではご使用にならないでください。

目を傷める原因となります。

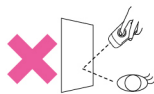

鏡などの反射しやすい物に向けて照射しないでください。

目を傷める原因となります。

△注意 必ずお守りください。(火傷のおそれがあります。)




ほくろ・アザ・濃いシミ・日焼けした肌・日焼けなどで肌の色が黒い人などに照射しないでください。

〈本製品は、医療機器ではなく美容機器です。〉

## ご使用いただける部位

- ご使用者自身にのみご使用ください。
- 照射する部位が確認できる状態でご使用ください。

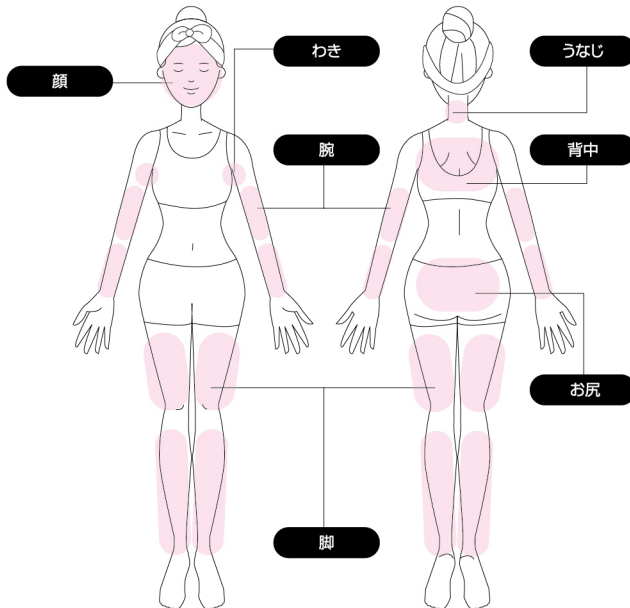

△目の周り、眉周り、唇、首元などには、ご使用にならないでください。


△顔へのご使用前後は、特に日焼けにご注意ください。

△顔は素肌(メイクなどを落とした状態)でご使用ください。

# セット内容と各部の名称


## 本体

照射/モード切替ボタン  
照射ライト  
出力レベル・モード表示ライト  
専用アダプター  
差込ジャック

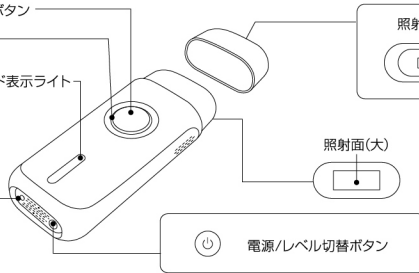

## 照射面(小)カバー

## アダプター

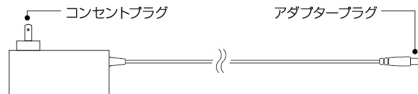


## サングラス



※サングラスのデザインは  
予告なく変更する場合があります。


## 取扱説明書(本書)

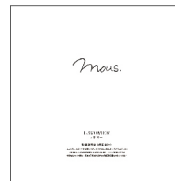



## ご使用の頻度について

---

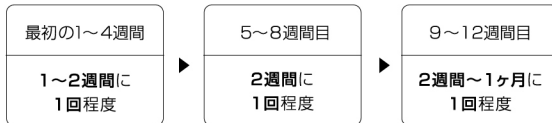

- △お使いになる頻度を守ってご使用ください。
- △効果は、部位や個人の体質によって異なります。
- △上記の頻度を超えてのご使用はおやめください。

## ご使用になる前に

---

### ●パッチテストを行ってください。

初めてご使用になるときや、しばらくご使用にならなかったときは、肌トラブルが起きないか確認する為にパッチテストを行ってください。

- ①ご使用したい部位に、手動照射モードの出力レベル1で1回テスト照射してください。
- ②48時間後にテスト照射した箇所に異常がないかご確認ください。

△パッチテストは必ず上記の指定モードとレベルで行ってください。

設定と使用の詳細は、P.9(ご使用方法)を参照してください。

△パッチテストを行った箇所は1週間照射しないでください。

△肌に炎症(赤くなるなど)が発生した場合はご使用を中止し

2日たっても炎症が続く場合は、医師にご相談ください。

### ●肌汚れやメイクなどを落とし、素肌(メイク、日焼け止め、ローション、クリーム、香水などを洗い流した状態)の状態でご使用ください。

△メイクの上からご使用すると肌トラブルの原因となります。

- トリートメントを行う部位の毛を除毛してください。

※カミソリは付属しておりません。

△毛が伸びていたり、肌の表面に毛が残っていたりすると火傷の原因となります。

△ワックスや毛抜きなど、毛を毛根から抜く処理はしないでください。

△除毛せずにトリートメントを行うと熱く感じます。

また、照射面が汚れやすくなる為トリートメントが十分に行えません。



- 照射前に必ず付属のサングラスを装着してください。



## 専用アダプターの接続方法



1.専用アダプタープラグを体のジャックにしっかりと差込んでください。

2.コンセントプラグをコンセントにしっかりと差込んで接続してください。

△必ず順番通りに接続してください。ショートするおそれがあります。

△濡れた手でセットしないでください。感電するおそれがあります。



## ご使用方法

△必ずご使用になるときの出力レベルは、レベル1からご使用ください。

△照射前に付属のサングラスを着用してください。

△部屋を明るくしてご使用ください。

△強い光が照射される為、近くに人やペットがないことをご確認ください。

△ご使用時に強い光が照射されます。ご使用箇所を直視しないようにご注意ください。

△顔にご使用する際は、必ず目を閉じてご使用ください。

△本製品には防水機能はありません。

1.コンセントプラグをコンセントに接続すると  
本体底面内部のランプが点灯します。




2.電源/レベル切替ボタンを3秒以上長押しすると  
電源がONになり出力レベル・モード表示ライトの  
レベル1部分が点灯し手動照射モードになります。



3.電源/レベル切替ボタンを  
短押しして好みの  
出力レベルを選択します。



- 5 レベルは1～5まであります。
- 4 短押しすることによりレベルが上がり
- 3 5までいくと1に戻ります。
- 2
- 1 ※選択されたレベルが点灯または点滅します。

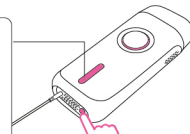

4.照射/モード切替ボタンを3秒以上長押ししてモードを選択し  
各モード詳細欄の内容を参考に照射をしてください。



モードは下記の2つです。長押しするごとに切り替わります。

### 手動照射モード

手動照射モードは、照射時に照射/モード切替ボタンを短押しする毎に1回照射します。  
細かい部分にご使用する際に適しているモードです。

肌に当てると照射ライトが点滅しますので照射してください。

△肌に密着していないと照射ライトは点滅しません。  
密着させてください。




### 自動照射モード

自動照射モードは、照射/モード切替ボタンを押さなくても  
肌に照射面を当てただけで自動で照射してくれる、広範囲にご使用する際に適しているモードです。

照射面(小)カバーを取り外します。

照射面(大)を肌に当てると  
自動で照射されます。


△肌に密着していないと照射ライトは点滅しません。  
密着させてください。

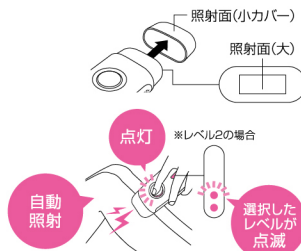

△ 本体内部温度が高温になると照射ライトが赤点滅し照射できなくなります。  
その際は、赤点滅が終わるまで少し時間をおいてからご使用ください。



△ 電源をONにしてから5分経つと自動で電源がOFFになります。  
そのままご使用を続けたい場合は電源ボタンを3秒以上長押しして電源をONにしてください。

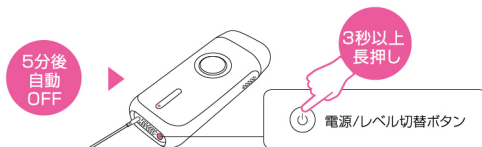


5. 照射後はお手持ちのクーリングジェルなどで保湿してください。

△ ご使用後に肌の熱、ほてり、赤みなどが気になる場合は冷やしたタオルなどを当ててください。




6. ご使用後は電源/レベル選択ボタンを3秒以上長押し電源をOFFにしてからコンセントプラグを抜いてください。

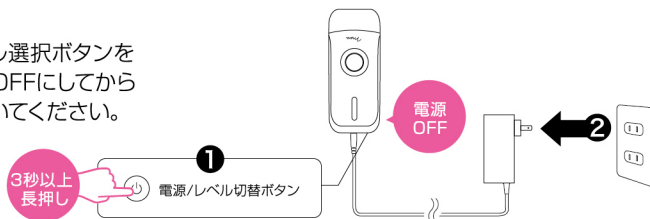

## 当て方と注意点について

---

△ 同じ部位を重複して照射しないように必ずずらしてください。

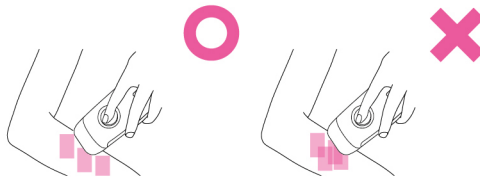

△ 同一部位に照射する場合は、一週間ほど期間をあけてください。

△ レベルが強くなると熱を強く感じますが異常ではありません。

△ ご使用時に毛が焼けることによる、煙やにおいが発生する場合があります。

△ 同じ箇所に連続で照射しないでください。

△ 強い痛みを感じた場合は、直ちにご使用を中止してください。

△ ご使用時は、照射面に、熱を持ちますので触らないでください。

## お手入れの仕方

衛生性を保つ為、ご使用の度にお手入れを行ってください。  
お手入れを行う際は、必ず電源をOFFにしコンセントプラグを抜いた状態で行ってください。



照射面(大)、照射面(小)カバー、本体に付着した汚れを乾いた布で優しく拭き取ってください。



薬品類、洗剤、オイルは  
ご使用にならないでください。



本体は水洗い  
しないでください。

## 保管の仕方

ご使用後は、以下の場所以外で保管してください。

△保管する際はアダプターをコンセントから抜いてください。



直射日光の  
当たる場所



温度・湿度の  
高い場所



乳幼児の  
手の届く場所



ホコリの  
多い場所



強い電波・磁気の  
発生する場所

## 破棄する場合は

---

本製品およびパッケージなどをゴミとして廃棄する場合は  
お住まいの市区町村の定める区分に従ってください。


## お問い合わせ先・送付先

---

本製品についてのお問い合わせや、修理品の送付先は下記へお願いいたします。

本製品についてのお問い合わせ消耗品の交換依頼は下記まで

ジャパンギャルズお客様相談室

 **0120-62-6670**


10:00～18:00（土日祝日を除く）

 [info@mous-beauty.jp](mailto:info@mous-beauty.jp)  [mous-beauty.jp](http://mous-beauty.jp)

修理品のご送付は下記まで

ジャパンギャルズ メンテナンスセンター

760-0078 香川県高松市今里町1-8-13

 **0120-62-6670**



## 故障かな？と思ったら

修理に出す前に、この取扱説明書をよくお読みいただき  
下記の点をもう一度チェックしてください。  
故障の場合は本体の分解などはせずに、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

<b>電源が入らない</b>	<p>本体とアダプターをきちんと接続してください。</p> <hr/> <p>専用のアダプターをご使用ください。</p>
<b>照射されない</b>	<p>照射面をしっかりと肌へ密着させてください。</p> <hr/> <p>本体内部温度が高温になると、照射ライトが赤点滅し照射できなくなりますので、赤点滅が終わるまで少し時間を置いてからご使用ください。</p>
<b>電源が切れる</b>	<p>電源をONにしてから、5分以上経過するとご使用中でも発熱防止と安全の為自動で電源がOFFになります。再度ご使用になる場合は、電源ボタンを3秒以上長押しし電源をONにしてご使用ください。</p>

## 本体仕様

---

本体サイズ	約W66×D34×H159mm（照射面(小)カバーセット時）
本体重量	約206g
電源（入力）	AC100～240V 50/60Hz
電源（出力）	DC12V 3A
消費電力	最大36W
照射回数	30万回以上 ※レベル1での照射時
出力面積	照射面(大)3.3cm <sup>2</sup> /照射面(小)1.3cm <sup>2</sup>

## 取扱説明書ダウンロードの仕方

---



ダウンロード版は  
こちらの  
QRコードを  
読み取ってください

1. QRコードを読み取ります
2. ご利用上のご注意を  
お読みいただき  
同意ボタンをタップしてください
3. ラボマーの取扱説明書を選択し  
ダウンロードしてください

*Mous.*

発売元 | 株式会社ジャパングールズSC  
[japangalssc.jp](http://japangalssc.jp)

## 品質保証書

このたびは、ラボマーをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は厳重な検査を行い高品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生しました場合、保証規定によりお買い上げ後1年間は無償修理いたします。

※本製品の保証は、日本国内でご使用になる場合に限りです。

This warranty is valid only in Japan.

品名                      ラボマー                      型番                      mous - 17927

製品 No.

お名前

T E L

ご住所

※以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をいただってください。

お買い上げ店名

Ⓔ

住所

T E L

お買い上げ年月日

### 保証規定

①取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。②本体・アダプターが保証対象となります。※コードの断線による故障の場合は保証対象外となります。③無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、本製品に本書を添えてお客様相談室にご依頼ください。なお、送料はご負担願います。④無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。②お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。③火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変による故障および損傷。④本書の提示が無い場合。⑤本書に記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。⑥消耗部品。⑦故障の原因が本製品以外に起因する場合。⑧本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。⑨この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。無償修理期間経過後の修理等については有償といたします。⑩保証書に記載された個人情報、対象製品の保守サービス・安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。