

Mous.

ORALUMINUS

オーラルミナス

取扱説明書（保証書付）




このたびは、オーラルミナスをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。



尚、本器を他の人に貸与・譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください。

安全上のご注意


●この製品を安全に正しくご使用いただくために、ご使用前に必ず[安全上のご注意]をよくお読みになり十分に理解してください。●お読みになった後はいつも手元においてご使用ください。●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

	守らないと生命や身体に重大な被害を負うことが想定される内容
	守らないと生命や身体に重大な被害が発生することが想定される内容
	守らないと軽傷程度の被害または物損事故の発生が想定される内容


図記号の例




	ⓧ記号は禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な注意内容はⓧの中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“分解禁止”を示します。
	この記号は強制(必ず守ること)を示します。具体的な強制内容は、近くに文章や絵で示します。左図の場合は“特定しない一般的な使用者の行為”を示します。

⚠ 危険



	●誤動作を招く恐れがありますので、下記のような医療用電子機器との併用は絶対に行わないでください。①ペースメーカーなどの体内植込み型医療用電子機器②人工心肺などの生命維持用電子医療機器③心電計などの装着型の医療用電子機器●怪我や感電の恐れがありますので指定以外の誤ったご使用をなさらないでください。
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⚠ 警告


	<p>次のような人または部位には、事故やトラブルの原因になりますので絶対にご使用にならないでください。</p> <p><人>●心臓に疾患がある人●顔面神経痛の人●医師の治療を受けている人●金属アレルギーの人●体調のすぐれない人●痛覚・知覚に障害のある人●口腔内の感覚が弱い人●飲酒中や薬を服用中の人●乳幼児●他人</p> <p><部位>●傷口●指定部位以外</p> <p>次のような人または部位に気になる症状がある場合は、医師にご相談の上ご使用ください。</p> <p><人>●歯周病の人●通院中の方●妊娠中の方</p> <p><部位>●虫歯・歯槽膿漏の部分、ラミネートベニア(つけ歯)・金歯・銀歯・インプラント・歯につめものをしている部分</p> <p>※痛みを感じる方は、我慢せずにご使用をお控えください。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	●入浴中や浴室などの湿度の高い所では、ステインクリアモードはご使用にならないでください。強い電気ショックを受けたり、感電したりする恐れがあります。●本体に異常を感じた場合は、ただちに電源を切りご使用を中止して取扱店に連絡してください。●指定以外の目的にはご使用にならないでください。●感電事故の恐れがありますので、他の電気製品(美容器など)と同時にご使用にならないでください。●火災・感電・故障の原因になりますので異物を本体内部に入れないでください。●超音波スクレイパーを歯に強く押し付けたり、1カ所へ長時間固定したりしたままにしないでください。
	●本体・充電台・充電用アダプターの修理・分解・改造は行わないでください。感電および異常動作により、身体に重大な被害を与える恐れがあります。●本体・充電台・充電用アダプター内部に異物を入れないでください。異物が入ったままご使用になると、火災・感電・故障の原因となります。
	長期間ご使用にならない場合は、必ずコンセントプラグを抜いてください。

⚠ 注意

	<p>次のような行動または操作を守らないと、事故や故障の恐れがあります。</p> <p>●身体に異常(気分が悪くなる・痛みを感じる・歯茎など口腔内に異常を感じる・かゆみ・発赤・蕁麻疹など)を感じたら直ちにご使用を中止してください。●歯茎が出血する場合はご使用を中止してください。そのままご使用を続けると、症状を悪化させることがあります。1～2週間程度で出血が止まりますが、出血が2週間以上続く場合は、歯科医等にご相談してください。●破損した製品はご使用にならないでください。●お手入れをするときはシンナー・アルコール・ベンジン・灯油などの溶剤や薬品類・磨粉・油分などはご使用にならないでください。●本体・充電台・充電用アダプターの上に重い物を置いたり、衝撃(高い所からの落下など)を与えたりしないでください。●充電台・充電用アダプターは濡らさないでください。●充電台・充電用アダプターに、オイル(油分の多い化粧品類も含む)などを付着させないでください。●USBプラグ・コンセントプラグにほこりが付着しないように定期的に乾いた布などでお手入れをしてください。●充電は浴室など湿度の高いところでは決して行わないでください。感電・故障の原因になります。●充電台にコインやクリップなど金属製の物を入れないでください。充電台が熱くなり火傷や火災の原因になります。●充電台のケーブルやUSBプラグを傷つける、加工する、極端に折り曲げる、引っ張る、ねじる、挟み込むなどしないでください。●必ず交流100Vでご使用ください。●充電用アダプターが破損していたり、コンセントへの差し込みが緩かったりするときは、ご使用にならないでください。●コンセントプラグは根元までしっかり奥まで差し込んでください。●ケーブル断線の原因となりますので、USBプラグ・コンセントプラグを抜く時は、ケーブルを持って抜かないでください。</p>
	虫歯や金歯・銀歯に近い部分をトリートメントしているとき、直接超音波スクレイパーの先端を当てていなくても、イオン出力による微弱電流を感じる場合があります。このような場合は、アースプレートに触れないように本体を持ち、イオン出力が歯に伝わらないようにして、超音波出力のみでトリートメントを行ってください。


セット内容と各部の名称

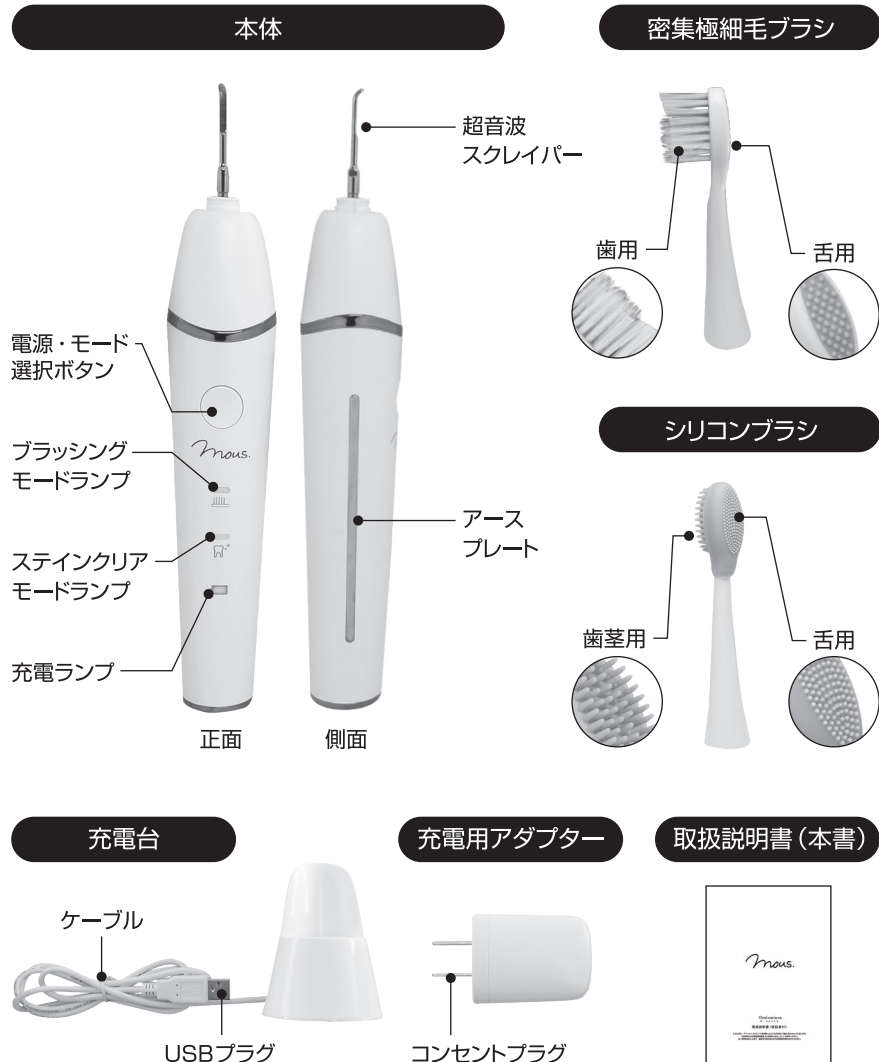

■本体仕様

定格電圧	AC100-240V 50/60Hz	防水仕様	IPX7(本体)
本体サイズ	約W35.2×D32.5×H196.5mm(ブラシ無)	本体重量	約103g
使用電池	リチウムイオンポリマー電池(3.7V)		

充電の仕方

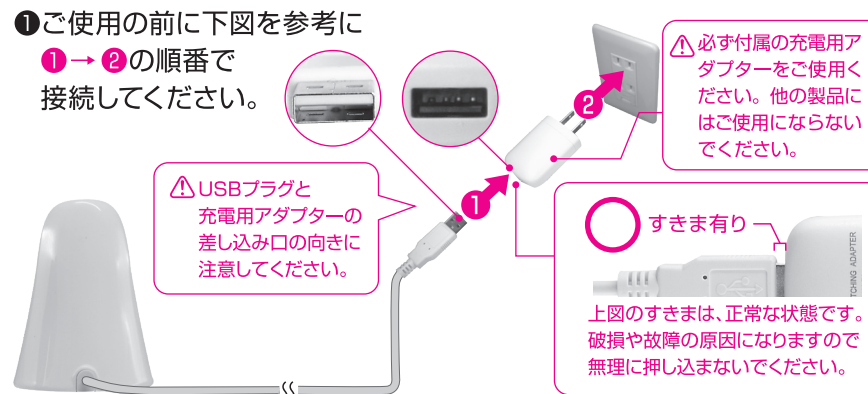

注意

- ショートする恐れがありますので、必ず付属の充電用アダプターと充電台を先に接続してください。
- 感電する恐れがありますので濡れた手で接続および充電用アダプターをコンセントから抜き差ししないでください。
- パソコン等のUSBは十分な電力を供給できない場合があります、充電が完了しない事がありますので使用はお控えください。



③ 充電完了後、充電用アダプターをコンセントから取り外してください。

④ ご使用後、充電残量がなくなりましたら再度充電を行ってください。

※連続使用時間目安は約1.5～2時間です。充電電池残量がなくなるとランプが数回点滅して消灯し本体の作動が停止します。




注意

- 充電電池は消耗品になります。充電を繰り返したり、長時間ご使用にならなかつたりした場合は少しずつ充電電池が劣化し、ご使用できる時間が短くなります。その場合は、充電電池の交換(有償)をお勧めします。
- 充電電池の消耗を抑える為、長時間ご使用にならない場合でも1ヶ月に1回程度充電する事をお勧めします。
- 充電台にコインやクリップなど金属製の物を入れないでください。充電台が熱くなり火傷・火災の原因になります。

ブラシの取り付け・取り外し方

取り付け

- 1 ブラシ正面下部の [A] と本体の正面を合わせてください。
- 2 ブラシを矢印の方向に ゆっくりとしっかり 差し込んでください。

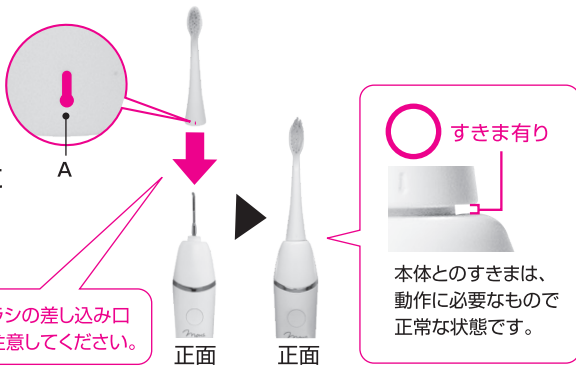

△ 本体とブラシの差し込み口の向きに注意してください。

すきま有り

本体とのすきまは、動作に必要なもので正常な状態です。

取り外し

- 1 ブラシを矢印の方向に まっすぐ引っ張って 取り外してください。



△ 注意

- 必ずオーラルミナス専用のブラシをご使用ください。
- 破損や故障の原因になりますので、無理に押し込んだり斜めから差し込んだりしないでください。
- 取り外しの際、ブラシ内部の樹脂が削れる場合がありますが動作に支障はありません。削れた樹脂を取り除いてご使用ください。

ブラシ(消耗品)の購入について

効果を維持する為に、以下のような時は新しいブラシに交換してください。

交換時期の目安


- 密集極細毛ブラシ：
 - ・毛先が広がっている・形状に変形がなくても約3ヶ月を過ぎた時
- シリコンブラシ：
 - ・ちぎれたり形状が変化したりしている・形状に変形がなくても約3ヶ月を過ぎた時

ご購入について

- ブラシのご購入については、下記お客様相談室までお問い合わせください。
☎ 0120-62-6670 受付時間 10:00~18:00 (土日祝を除く)


電源・モード選択ボタン操作の仕方

ブラッシングモード(ソフト)

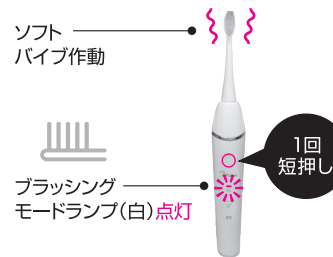

電源がOFFの状態、電源・モード選択ボタンを1回押すと、ブラッシングモードランプが点灯しソフトバイブが作動します。

ブラッシングモード(スタンダード)

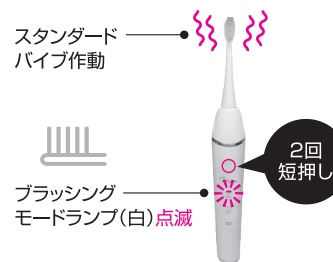


電源がOFFの状態、電源・モード選択ボタンを2回押すと、ブラッシングモードランプが点滅しスタンダードバイブが作動します。

ステインクリアモード



電源がOFFの状態、電源・モード選択ボタンを3回押すと、ステインクリアモードランプが点灯し超音波・イオンが出力します。

電源オフ

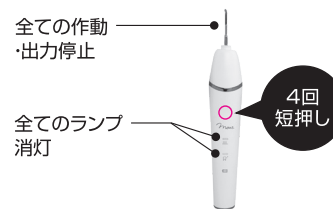

電源がOFFの状態、電源・モード選択ボタンを4回押すと、ランプが消灯し全ての機能が停止します。

△ 注意

- 最後に操作を行ってから10分経過しますと電源が自動的にOFFになります。

歯を磨きたい時



密集極細毛ブラシ

+ ブラッシングモード



密集極細毛ブラシと超高速音波振動で
歯の表面・歯茎・噛み合わせ部分の歯垢を除去します。

- ① 密集極細毛ブラシを取り付け、水・または歯磨き剤を
ブラシに軽く塗布してください。

(P.5ブラシの取り付け・取り外し方参照)



- ② お口の中にブラシを入れてから電源・モード選択ボタンを押し
お好みの振動を選択してください。

△ 初めの方は(ソフト)からご使用ください。

ソフト ・初めの方
・刺激に敏感な方

or

スタンダード ・通常の
ブラッシング時



ブラッシングモード
ランプ(白)点灯



ブラッシングモード
ランプ(白)点滅

△ 注意

- ブラッシングモード時は、ブラシを取り外さないでください。
- 歯や歯茎を傷つける原因になりますので、ブラッシングモードで超音波スクレイパーは絶対にご使用にならないでください。
- 歯磨き剤の飛び散りを防ぐため、必ずお口の中にブラシを入れてから電源を入れてください。



- ③ 右ページを参考に通常の歯磨きの要領で歯の表面を
ブラッシングしてください。

- ④ ご使用後は、付着した汚れを水で洗い流し、
ブラシを取り外してから、よく乾かしてください。



△ ブラシは装着したまま洗ってください。

△ 根元の汚れもよく洗い流してください。



ブラッシングの仕方

— 毎日1~3回を目安にご使用ください —

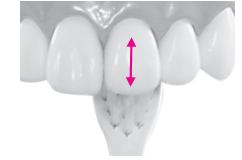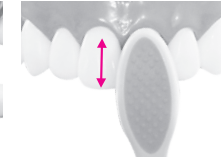


上の歯の表面

毛先をきちんと歯にあてて
上下・左右に細かく動かして磨きます。


上の歯の内面

ブラシを縦にして磨きます。

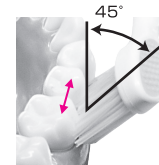

歯茎の境目

45度の角度に毛先を
入れて小刻みに磨きます。

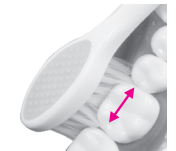

奥歯の内面

ブラシを斜めに
入れて磨きます。






噛み合わせ部分

歯の噛み合わせ部分に
毛先をまっすぐ
あてて前後に磨きます。



奥歯の一番奥

ブラシの先端をあてて
小刻みに磨きます。

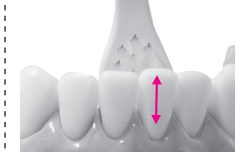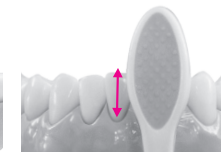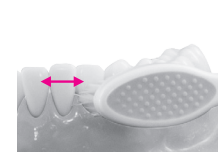

下の歯の表面

毛先をきちんと歯にあてて
上下・左右に細かく動かして磨きます。

下の歯の内面

ブラシを縦に
して磨きます。

歯茎のケア、舌の汚れを除去したい時

シリコンブラシ

+

ブラッシングモード



やわらかなシリコンブラシと超高速音波振動で
歯茎のトリートメントと舌の汚れ除去が行えます。

- ①シリコンブラシを取り付け、
水をブラシに軽く塗布してください。

(P.5ブラシの取り付け・取り外し方参照)

⚠ 歯茎や舌をケアする時は、歯磨き剤は使用しないでください。



- ②お口の中にブラシを入れてから電源・モード選択ボタンを押し
お好みの振動を選択してください。

⚠ 初めの方は(ソフト)からご使用ください。

ソフト

・初めての方
・刺激に敏感な方

OR

スタンダード

・しっかりケア
したい時



1回
短押し

Mous.



ブラッシングモード
ランプ(白)点灯



2回
短押し

Mous.



ブラッシングモード
ランプ(白)点滅

⚠ 注意

- ブラッシングモード時は、ブラシを取り外さないでください。
- 歯や歯茎を傷つける原因になりますので、ブラッシングモードで超音波スクレイパーは絶対に使用しないでください。



- ③右ページを参考にご使用ください。

- ④ご使用後は、付着した汚れを水で洗い流し、
ブラシを取り外してから、よく乾かしてください。

⚠ ブラシは装着したまま洗ってください。


⚠ 根元の汚れもよく洗い流してください。



歯茎のトリートメントの仕方

— 毎日ご使用になれます —

こちらの面を使用

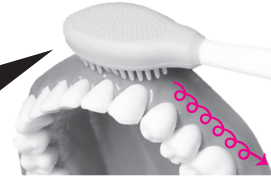


歯茎の表面

POINT

出来るだけ歯茎に
対して垂直に
軽く触れる様に
あててください。

前歯から奥歯に
やさしくゆっくりと小さな円を
描くように動かします。

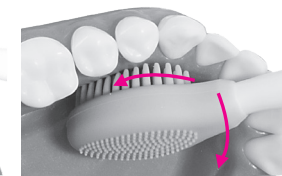

歯茎の内面

ブラシを斜めに入れて
前歯から奥歯に向かって
ゆっくり動かします。


⚠ 注意

- シリコンブラシを強く噛んだり、引っ張ったりしないでください。
- 劣化の原因になりますので、歯にはご使用にならないでください。
- 歯茎を傷つける原因になりますので、強く押しあてないでください。

舌の汚れ除去の仕方

— 毎日ご使用になれます —

こちらの面を使用

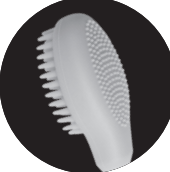

シリコンブラシ(裏面)を
舌に軽くあてゆっくりと
奥から手前に向かって
移動させます。



POINT

密集極細毛ブラシ(裏面)でも同じ要領で舌の汚れを除去できます。

⚠ 注意

- 舌に強く押し付けたり、1カ所へ長時間固定したままにしたりしないでください。
- 嘔吐反応がおきないように舌を突き出してご使用ください。

フェイシャルトリートメントをしたい時



シリコンブラシ

+

ブラッシングモード



シリコンブラシでお口の中のトリートメントポイントを刺激
内側からお顔のトリートメントが行えます。

- ①シリコンブラシを取り付け、
水をブラシに軽く塗布してください。
(P.5ブラシの取り付け・取り外し方参照)



- ②お口の中にブラシを入れてから電源・モード選択ボタンを押し
お好みの振動を選択してください。

△初めての方は(ソフト)からご使用ください。

ソフト ・初めての方
・刺激に敏感な方

OR

スタンダード ・しっかりトリートメント
したい時



1回
短押し

ブラッシングモード
ランプ(白)点灯



2回
短押し

ブラッシングモード
ランプ(白)点滅

△注意

- ブラッシングモード時は、ブラシを取り外さないでください。
- 歯や歯茎を傷つける原因になりますので、ブラッシングモードで超音波スクレイパーは絶対にご使用にならないでください。



- ③右ページを参考にご使用ください。


- ④ご使用後は、付着した汚れを水で洗い流し、
ブラシを取り外してから、よく乾かしてください。

△ブラシは装着したまま洗ってください。



フェイシャルトリートメントの仕方

— 毎日ご使用になれます —

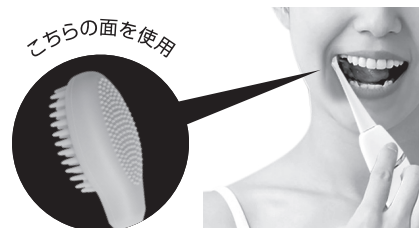


シリコンブラシ(裏面)を
お口の内側に軽くあて
下記を参考にゆっくりと
動かします。



頬の内側

頬骨の下からほうれい線裏まで
上から下へ向かって
ゆっくりと動かします。


△口の奥まで入れ過ぎ
ないでください。

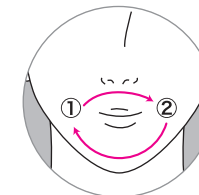

口元

口角から唇裏側にそって
矢印のように
ゆっくりと動かします。

△上唇の内側中央に
ある筋には
あてないでください。

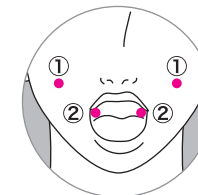

頬骨の下から奥歯の奥

頬骨の下と奥歯の奥の
心地よい箇所をゆっくりと
押してください。

△強く押し付け
過ぎないでください。

△注意

- 1カ所へ長時間固定したままにしないでください。
- 長時間のご使用は避けてください。
- 強く押しつけ過ぎないでください。赤くなったりうっ血したりする場合があります。
- シリコンブラシを強く噛んだり、引っ張ったりしないでください。
- 劣化の原因になりますので、歯にはご使用にならないでください。
- ひび割れ・キズなど、破損したブラシはご使用にならないでください。
- 本来の目的以外にはご使用にならないでください。
- 一般的に危険と思われる使い方はしないでください。

ステイン・ヤニ・歯垢を除去したい時

超音波スクレイパー + ステインクリアモード

毎分約240万回の超音波とイオンが出力。
超音波とイオンでヤニ、ステイン、歯垢をやさしく落とします。

※全てのステイン(ヤニ)を取りきれぬわけではありません。
また、生まれながらの歯の色を白くしたり、
加齢による歯の黄ばみ・変色した歯の色を白くしたりすることはできません。

①ご使用前にうがいなどを行い、常に歯が濡れた状態にしてください。

②電源・モード選択ボタンを3回押し
ステインクリアモードを選択してください。

注意

- 間違ってもブラッシングモードを選択しないでください。
歯・歯茎を傷つける原因となります。



③本体のアースプレートに
手が触れるように、持ってください。

△濡れた手で触れないでください。



④右ページを参考にしてください。




⑤ご使用後は、超音波スクレイパーに付着した汚れを
水で洗い流し、水分をよく拭き取ってください。

注意

- 急な流水で流さないでください。
- 長時間水の中に放置しないでください。
- 破損の原因となりますのでお湯は使用しないでください。

ステイン・ヤニ・歯垢の除去の仕方

— 汚れ、黄ばみが気になる時にご使用ください —

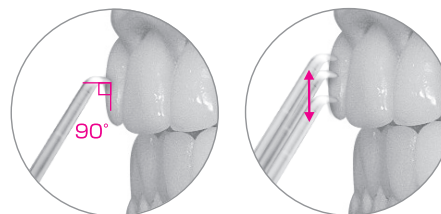

超音波スクレイパーの先端が
歯に垂直になるように軽くあて
力を入れずに、上下左右に
細かくすべらせるように
動かしてください。

※超音波出力による共鳴音がありますが
性能と効果には問題ありません。




POINT 虫歯や金歯・銀歯に近い部分をトリートメントしているとき、直接超音波スクレイパーの先端をあてていなくても、イオン出力による微弱電流を感じる場合があります。このような場合は、アースプレートに触れないように本体を持ち、イオン出力が歯に伝わらないようにして、超音波出力のみでトリートメントを行ってください。

重要
必ず守る

ご使用中は常に歯が濡れた
状態を保ってください。

途中で水分がなくなった場合は、水分
を補給するか、うがいなどを行ってくだ
さい。

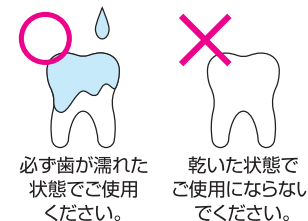

注意

- 虫歯・歯槽膿漏の部分、ラミネートベニア(つけ歯)・金歯・銀歯・インプラント・歯につめもの
をしている部分にはご使用にならないでください。
- 歯周病の方は歯科医にご相談の上、ご使用ください。
- 歯茎との境目にご使用した場合、健康な歯茎の場合でも歯茎から出血することがありま
す。歯茎から出血が続く場合は、歯周病などの歯茎の異常が考えられますので、ご使用中を中止
して歯科医の診断を受けてください。
- 超音波スクレイパーで歯の表面を強くこすると歯を痛めますので絶対にしないでください。
- 超音波スクレイパーを歯に強く押し付けたり、1カ所へ長時間固定したままにしたりしないで
ください。
- 入浴中や浴室などの湿度の高い所でのご使用はおやめください。強い電気ショックを受け
たり、感電の恐れがあります。

お手入れの仕方

衛生性を保つため、超音波スクレイパーとブラシはご使用の度にお手入れを行ってください。電源がOFFになっている事を確認してから行ってください。

超音波スクレイパー



- ①超音波スクレイパーについた汚れは、水洗いしてください。
- ②お手入れ後は水分をよく拭き取ってください。

△注意

- 急な流水で水洗いしないでください。
- 長時間水の中に放置しないでください。
- 破損の原因になりますので、お湯は使用しないでください。

密集極細毛ブラシ シリコンブラシ



△本体に装着したまま洗ってください。


- ①ブラシについた汚れは、水洗いしてください。
- ②ブラシを本体から取り外してください。
- ③お手入れ後はよく乾かしてください。

POINT 根元の汚れもよく洗い流してください。

△注意

- 毛先を強く引っ張ったり、無理に広げたりしないでください。
- シリコンブラシは尖ったもので無理に洗わないでください。

充電台・本体

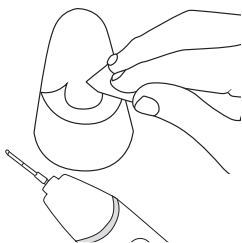

充電台・本体についた汚れは、水またはうすめた中性洗剤等を含ませ固くしぼった布などできれいに拭き取ってください。

△注意

- 充電台は防水仕様ではありませんので、水洗いしないでください。
- お手入れをする際はシンナー・アルコール・ベンジン・灯油などの溶剤や薬品類・磨粉などはご使用にならないでください。故障や変形の原因となります。
- 充電台、充電用アダプターをお手入れする時は、必ずコンセントからコンセントプラグを抜いてください。

保管の仕方

ご使用にならない時は、以下の点にご注意の上保管してください。



乳幼児や
お子様の手の
届かない場所に
保管してください。



直射日光の
あたらない場所に
保管してください。



温度・湿度の
高くない場所に
保管してください。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、この取扱説明書をよくお読みになり、下記の点をもう一度チェックし故障の場合は本体の分解などはせずにお買い上げの販売店にご相談ください。

- 電源が切れる 最後に電源・モード選択ボタンを操作してから10分以上経過していませんか?
→ボタン操作後、10分経過すると電源が自動的にオフになります。
- 電源がすぐに切れる 充電残量が少なくなってきていませんか?
→充電電池残量がなくなるとランプが数回点滅して消灯し、本体の作動が停止しますので充電を行ってください。(P.4充電の仕方参照)
- 電源が入らない 充電残量がありません。
→充電を行ってください。(P.4充電の仕方参照)
- 振動が弱く感じる 充電残量が少なくなっています。
→充電を行ってください。(P.4充電の仕方参照)
- ステインクリアモード使用中に共鳴音がしなくなった 最後に電源・モード選択ボタンを操作してから10分以上経過していませんか?
→ボタン操作後、10分経過すると電源が自動的にオフになります。
- ブラッシングモード使用時に効果が薄くなったように感じる ブラシの交換時期かもしれません。
お客様相談室までお問い合わせください。
☎0120-62-6670 受付時間 10:00~18:00(土日祝を除く)

破棄する場合は

本器およびパッケージなどをゴミとして廃棄する場合は、お住まいの市町村の定める方法に従ってください。



Li-ion

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力を

本器に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。破棄する場合は、お住まいの市町村の定める方法に従い廃棄してください。
※本器を廃棄する場合、完全に作動しなくなるまで電池を放電させてください。
※完全に作動しなくなった事をご確認後廃棄してください。

品質保証書

このたびは、オーラルミナスをお買い求めいただきありがとうございます。本器は厳重な検査を行い高品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生しました場合、保証規定によりお買い上げ後1年間は無償修理いたします。

※本器の保証は、日本国内でご使用になる場合に限りです。

This warranty is valid only in Japan.

品名 オーラルミナス 型番 mous-15770 製品 No.

お名前 TEL

ご住所

※以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をいただくとください。

お買い上げ店名

住所

TEL お買い上げ年月日



●発売元：株式会社ジャパングヤルズSC 東京都港区虎ノ門5丁目2-6

●修理品ご送付先：ジャパングヤルズ メンテナンスセンター
〒760-0078 香川県高松市今里町1-8-13

●商品やブラシの交換、ご購入についてのお問い合わせは下記まで
お客様相談室 ☎0120-62-6670 10:00~18:00 (土日祝日を除く)

保証規定

●取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。●本体・充電台・充電用アダプターが保証対象となります。※充電台のケーブル断線による故障の場合は保証対象外となります。●無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお買い上げの販売店にご依頼ください。なお、販売店までの送料は、ご負担願います。●無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。①ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。②お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。③火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変による故障および損傷。④本書の提示が無い場合。⑤本書に記入のない場合、あるいは字句を書き換えた場合。⑥消耗部品。⑦故障の原因が本製品以外に起因する場合。●本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。無償修理期間経過後の修理等については有償といたします。●保証書に記載してある個人情報、対象製品の保守サービス・安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。