

Mous.

PLUMINUS

プルミナス

取扱説明書（保証書付）




このたびは、プルミナスをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みになり正しくご使用ください



本器を他の人に貸与・譲渡する場合は必ずこの取扱説明書もお付けください

安全上のご注意


●この製品を安全に正しくご使用していただくために、ご使用前に必ず「安全上のご注意」をよくお読みになり十分に理解してください。●お読みになった後はいつも手元においてご使用ください。●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。表示と意味は次のようになっています。

 危険	守らないと生命や身体に重大な被害を負うことが想定される内容
 警告	守らないと生命や身体に重大な被害が発生することが想定される内容
 注意	守らないと軽傷程度の被害または物損事故の発生が想定される内容


図記号の例

	◎記号は禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な注意内容は◎の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は“分解禁止”を示します。
	この記号は強制（必ず守ること）を示します。具体的な強制内容は、近くに文章や絵で示します。左図の場合は“特定しない一般的な使用者の行為”を示します。

△ 危険

	●誤動作を招く恐れがありますので、下記のような医用電気機器との併用は絶対にしないでください。①ペースメーカーなどの体内埋込型医用電気機器②人工心肺などの生命維持用医用電気機器③心電計などの装着型の医用電気機器
--	--

△ 警告

	次のような人または部位には、事故やトラブルの原因になりますので絶対にご使用にならないでください。 <人> ●急性疾患の人●37度以上の(有)熱性疾患の人●疲労の激しい人●健康に特にすぐれない人●飲酒をしている人●薬を服用している人●血圧異常の人●感染症疾患の人●結核性疾患の人●悪性腫瘍の人●心臓疾患の人●アトピー性皮膚炎の人●アレルギー体質で特にお肌が敏感な人●血友病疾患の人●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人●顔面黒皮症の人●顔面神経痛の人●12才以下の子供※通院中の方、妊娠中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。
--	--



※乳幼児やご自分で意思表示ができない人、他人へのご使用は避けてください。

<部位>

●整形手術をした部位●喉仏の周辺●眼球、上瞼●口●耳●粘膜の部位●傷口●ニキビや噴出物で炎症を起こしている部位●化粧品等で皮膚炎を起こしている部位●過度の日焼けで肌が赤くヒリヒリし、炎症を起こしている部位●痛覚・知覚障害を起こしている部位●体内に金属・プラスチック・シリコン等を埋め込んでいる部位●カゴミやホテリ、物理的刺激等による病的なシミのある部位●指定部位（頭・顔・首・デコルテ）以外



●本来の目的や指定用途以外にはご使用にならないでください。事故・故障の原因になります。●使用時間や使用頻度はこの取扱説明書の内容を守ってお使いください。●指定のトリートメントが終了した直後に、再度同一部位をトリートメントしないでください。体調不良をおこす場合がありますので次のご使用までは少なくとも5時間以上休止してください。●ヘッド部を1箇所につき20秒以上固定させないでください。骨が痛くなったりお肌が赤くなったりヤケドする恐れがあります。●誤作動の恐れがありますので他の電気製品（美容器など）との同時使用はしないでください。●家庭用コンセント（AC100V）以外の電源ではご使用にならないでください。火災・感電・故障の原因になります。●本体および充電台を勝手に修理・分解・改造しないでください。作動不良を起こし、火災・ヤケドの原因になります。●ご使用後は専用アダプターをコンセントから抜いてください。火災の原因になることがあります。●充電用アダプターをコンセントから抜く際は、専用USBコード部分を持って引っ張らないでください。ショート・感電の原因になります。●傷んだ専用USBコードはご使用にならないでください。火災・感電の原因になります。●破損したヘッド部はご使用にならないでください。お肌トラブルやヤケドの原因になります。●本体・充電台・充電用アダプターを固いものにぶつけたり、落としたりしないでください。ケガ・故障の原因になります。●充電台に金属を入れないでください。故障の原因となります。●本体・充電台・充電用アダプターに異音や異常を感じた場合（熱くなる、こげるようなにおいがある等）または異臭がするときは、直ちに使用を中止し、必ず修理を依頼してください。火災・ヤケドの原因になります。



●他の機器の部品を流し手いでください。ヤケド故障の原因になります。●子供の手の届く場所に保管しないでください。●充電用アダプター・USBコードは付属の専用のもの以外はご使用にならないでください。火災・故障の原因になります。

△ 注意

次のような行動または操作を守らないと、事故や故障の恐れがあります。

●パソコンなどの精密機器や携帯電話・コードレス電話の近くではご使用にならないでください。ノイズにより誤動作の原因になることがあります。●脱毛や剃毛処理をした当日は、処理をした部位へのトリートメントをしないでください。炎症をおこす原因になることがあります。●強い電波や磁気の発生する場所で保管しないでください。故障の原因になることがあります。●本体を強く押ししたり、叩いたり、尖ったものなどで突いたりしないでください。故障の原因になることがあります。●本体・充電台・充電用アダプターに重いものをのせたり、落としたり、強い衝撃を加えないでください。故障の原因になることがあります。●本製品は、防水仕様(IPX7)ですが、お湯(浴槽の中など)に浸けっぱなしにしないでください。●出力中は本体を放置しないでください。火災・ケガの原因になります。●充電台・充電用アダプターは濡らさないでください。●充電用アダプターのコンセントプラグや、コンセントの差し込みがゆるいときはご使用にならないでください。火災・感電の原因になることがあります。●充電は浴室など湿度の高いところでは決して行わないでください。感電・故障の原因になります。●高温、多湿、ホコリの多い場所で保管しないでください。機器の劣化・故障の原因になることがあります。●直射日光が当たる所やストーブなどの発熱器具の近くで保管しないでください。故障の原因になることがあります。●3ヶ月以上ご使用にならなかった場合、発売元で点検を受けてください(有償)。本体内部に埃などが付着していた場合、発火などの原因になり感電する恐れがありますのでご自分での点検は絶対に行わないでください。●本製品は日本国内用に作られています。日本国内以外ではご使用にならないでください。●ヘッド部はシリコーンを使用しており消耗品となります。次の点に注意してお取り扱いいただき、破損または消耗(ベタつき・変色・変形)した場合はお客様相談室に交換依頼(有償)をしてください。そのままの状態ではお肌トラブルの原因となるため、絶対にご使用にならないでください。



- お肌に強く押し付けしないでください。凹んだり、ヘッドが変形したりします。
- メイクの上からご使用した場合は色移りすることがあります。
- 保管状況によりベタつきが発生する場合があります。保管場所にご注意ください。
- 経年劣化によりベタつきが発生する場合があります。ヘッド部を交換(有償)してください。
- 経年劣化により変色する場合があります。性能に問題はございませんが気になる場合は交換(有償)してください。
- ヘッド部に先の尖ったものや、使用目的以外の過度な力をかけないようにしてください。中の液体が漏れ故障の原因となります。
- ヘッド部のお手入れをするときは強酸性、強アルカリ性の溶剤などはご使用にならないでください。ヘッドが溶ける可能性があります。


●本体および付属品のお手入れは、取扱説明書の指示にしたがってください。充電台をお手入れするときは、必ず充電用アダプターをコンセントから抜いてください。●ヘッド部以外のお手入れをするときは、シンナー・ベンジン・灯油などの溶剤や薬品類(磨(みがき)粉)などはご使用にならないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

次のような行動または操作を守らないと、事故や故障の恐れがあります。


●身体に異常(気分が悪くなる・痛みを感じる)特に発赤・カブレなどの皮膚の異常を感じたら直ちにご使用を中止してください。●雷が鳴りだしたら直ちに使用を中止してください。落雷によって過電流が本体に流れ込み、異常出力が発生する原因になります。●充電中、雷が鳴り出したら直ちに充電用アダプター本体をコンセントから外し、充電を中止してください。落雷によって過電流が本体に流れ込み、故障する恐れがあります。

セット内容と各部の名称


本体

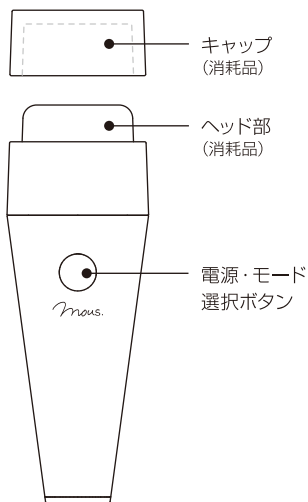


充電台

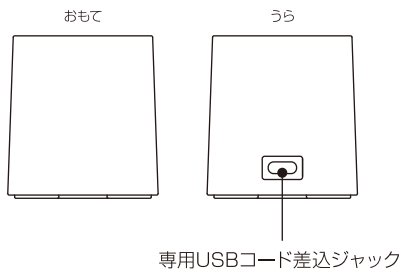


充電用アダプター

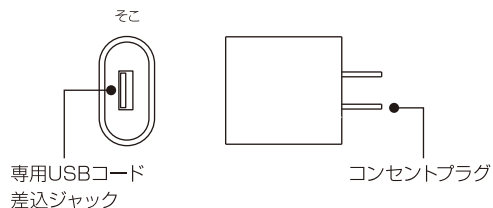

専用USBコード

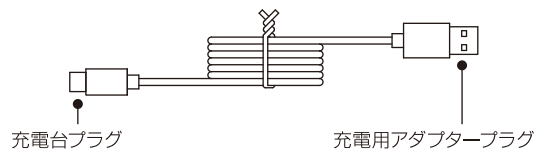

取扱説明書(本書)

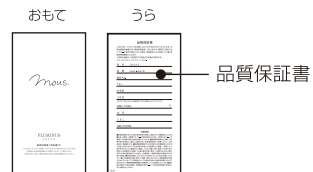


■本体仕様 (キャップ含まず)

定格電圧	AC100-240V 50/60Hz
本体サイズ	約φ52×150mm
防水仕様	IPX7(本体のみ)
本体重量	約156g
使用電池	リチウムイオンポリマー電池(3.7V)(消耗品)


充電の仕方

ご使用になる前に充電を行ってください


1.下図を参考に①→③の順番で接続します

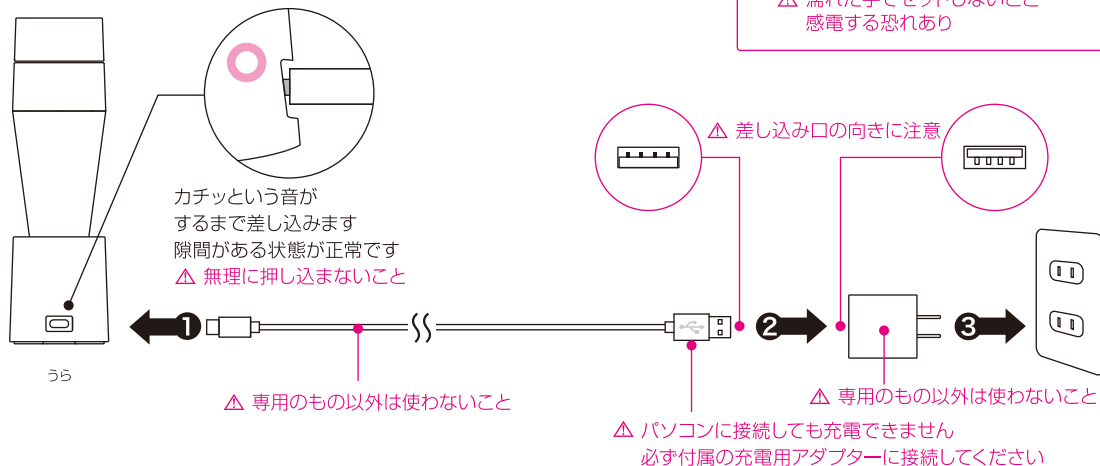

2.充電時間の目安は約7~8時間です

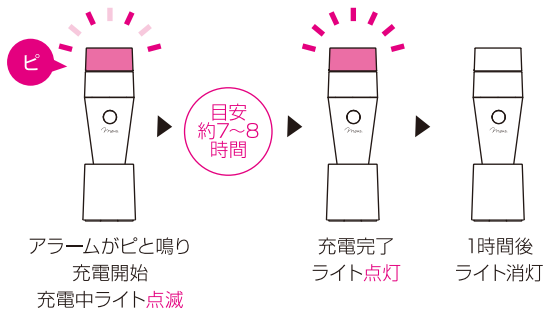

3.充電残量が少なくなると、電源を入れてから10分以内(通常は10分間作動)で下記のように停止しますので充電を行ってください

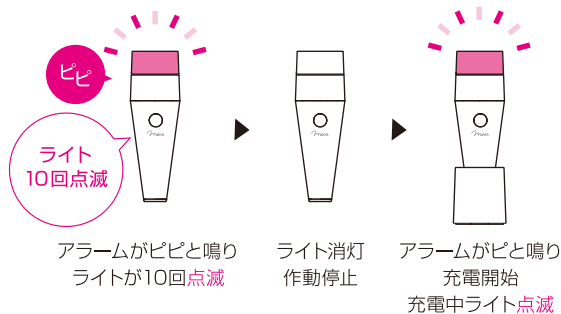

ONE POINT

充電完了後1時間はインテリア照明としてお楽しみいただけます
消灯または点灯したい場合は、電源・モード選択ボタンを短押しするとアラームがビと鳴りライトが消灯または点灯します
点灯してから1時間後に自動的に消灯します

△ ライト消灯後は専用アダプターをコンセントから抜いてください

基本操作

1.キャップを外します



2.電源・モード選択ボタンを約2秒長押しするとアラームがピと鳴りライトが点滅しハイレベルモードが作動します



3.右ページを参考に電源・モード選択ボタンを押して好みのモードを選択しトリートメントを行います

4.最後に操作してから約10分後にアラームがピピピと鳴りライトが自動消灯し作動が停止します



※10分以内に停止したい場合は電源・モード選択ボタンを約2秒長押しするとアラームがピと鳴りライトが消灯し作動が停止します



モード選択の仕方

電源・モード選択ボタンを短押しする毎に2つのモードが交互に切り替わります

電源を入れた時点で

より強い出力で
トリートメントが行える
ハイレベルモード

が選択されます
ノーマルモードから
切り替える場合は
電源・モード選択ボタンを
短押しすると
アラームがピと鳴り
ライト(明るめ)が点滅し
切り替わります



電源・モード選択ボタンを短押しするとアラームがピピピと鳴りライト(やや明るめ)が点滅し

初めての方や刺激が
苦手な方におすすめの
ノーマルモード

が選択されます



超音波洗顔

超音波でお肌の汚れを浮かせて洗浄しながら
お顔の超音波トリートメントが行えます
＜毎日ご使用になれます＞

Step1.

お手持ちの洗顔料をよく泡立て
お顔全体に塗布します

Step2.

電源・モード選択ボタンを押し
お好みのモードを選択します
(P.6モード選択の仕方参照)

Step3.

ヘッド部を洗顔料の上から
軽く押しあて、右ページの図を参考に
超音波洗顔を行ってください

Step4.

ご使用後はヘッド部についた
洗顔料を洗い流してから
水滴をきれいに拭き取ってください




ONE POINT

防水仕様ですので浴室でもご使用できます
キャップを左図のように
スタンドとしてご使用いただけます


- △ 充電台は防水仕様でないため
浴室には持ち込まないこと
本体を浴槽の中に浸けっぱなしに
しないこと
ご使用後は、浴室の外に保管すること

基本の動かし方

下から上に、内側から外側に向かって動かします

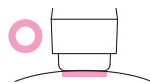

ヘッド部表面全体が
お肌に密着するように
軽くあてると効果的に
超音波が伝わります

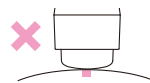

△ あてなさ過ぎ
ないこと
超音波が一点に集中し
痛みを感じる恐れあり



△ 強く押し付け
過ぎないこと
ヘッド部変形の
恐れあり

ONE POINT

本体の上の方を持つと、お肌へあてる時に力が入り過ぎて
強く押し付け過ぎてしまう可能性がありますので下の方を
持つことをおすすめします



フェイスライン

顎に数秒軽く押し当て
下から上に向かって円を描くように
くるくると動かします



頬

頬に数秒軽く押しあててから
内側から外側へ円を描くように
くるくると動かします



鼻・小鼻

小鼻には数秒軽く押しあて
鼻は下から上に向かって円を描くように
くるくると動かします



額・Tゾーン

内側から外側に向かって
内側から外側へ円を描くように
くるくると動かします

スキンケアトリートメント

美容成分を角質層のすみずみまで届ける
トリートメントと超音波トリートメントが行えます
＜毎日ご使用になれます＞

Step1.

ご使用前に洗顔を行ってください

Step2.

お手持ちのスキンケアコスメを
お肌に適量塗布します

（シートマスクをご使用の場合は
シートマスクをお肌にしっかりと密着させてください）

△ 水溶性のスキンケアコスメをご使用ください

Step3.

電源・モード選択ボタンを押し
お好みのモードを選択します
（P.6モード選択の仕方参照）

Step4.

ヘッド部をお肌に軽くあて
右ページの図を参考に
スキンケアトリートメントを行ってください

（シートマスクをご使用の場合は
お肌とシートマスクが密着するように押しあててください）

Step5.

ご使用後ヘッド部についた汚れは
水洗いまたはエタノールを含んだ
ウエットティッシュなどできれいに
拭き取ってください


基本の動かし方



お肌に軽くあて約10秒固定させます
下図を参考にあてる位置を少しずつ変えます



ヘッド部表面全体が
お肌に密着するように
軽くあてると効果的に
超音波が伝わります

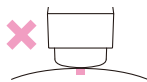

△ あてなさ過ぎ
ないこと
超音波が一点に集中し
痛みを感じる恐れあり



△ 強く押し付け
過ぎないこと
ヘッド部変形の
恐れあり



本体の上の方を持つと、お肌へあてる時に力が入り過ぎて
強く押し付け過ぎてしまう可能性がありますので下の方を
持つことをおすすめします


目元

目尻に軽くあて
上に持ち上げます

頬

位置を少しずつ
変えながら
あてます

△ 喉仏の周辺には
使用しないこと

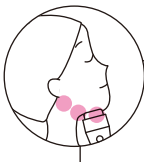

顎下など

顎の下から
耳の付け根まで
位置を変えながら
あてます

首

上から下
に向かって位置を
変えながら
あてます

額・Tゾーン

内側から外側に
向かって
位置を少しずつ
変えながらあてます

△ 上瞼には
使用しないこと

口元

口角に軽く当て
上に引き上げるように
押し上げます

フェイスライン

下から上に
引き上げるように
位置を少しずつ
変えながらあてます


デコルテ

内側から外側に
向かって位置を
変えながら
あてます

△ 一箇所に長時間固定しないこと △ 再度同一箇所に使用しないこと

お手入れの仕方

衛生性を保つため、ご使用の度にお手入れを行ってください
電源がオフになっている事を確認してからお手入れしてください

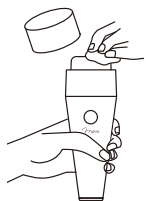

本体ヘッド部とキャップについた汚れは
エタノールを含んだウェットティッシュ等で
きれいに拭き取ってください

- △ 強酸性や強アルカリ性の
溶剤は使用しないこと
ヘッド部やキャップが
溶ける可能性あり



本体のヘッド部以外や充電台についた
汚れはティッシュや乾いた布などで
きれいに拭き取ってください

- △ シンナー・アルコール・ベンジン
・灯油などの溶剤や薬品類
・磨(みがき)粉などは使用しないこと
故障や変形の可能性あり

ヘッド部の交換について

本体ヘッド部はシリコンを使用しています
以下の症状がある場合はお客様相談室(P.14参照)に
ヘッド部の交換依頼(有償)をしてください




- ・保管状態の環境によりベタつきが発生している
- ・経年劣化によりベタつきが発生している
- ・破損し液漏れしている

- △ そのままの状態では絶対に使用しないこと
お肌トラブルの原因となるため

保管の仕方

ご使用後は、水分を拭き取りキャップをし
充電台に立て、以下の場所以外で保管してください

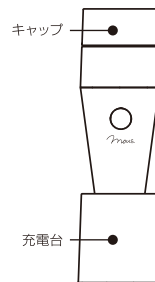

直射日光の
当たる場所



温度・湿度の
高い場所



乳幼児の
手の届く場所



ホコリの
多い場所



強い電波・磁気の
発生する場所

- △ 保管する際は専用アダプターをコンセントから抜いてください

廃棄する場合は

本器およびパッケージなどをゴミとして廃棄する場合は
お住まいの自治体の定める区分に従ってください

リチウムイオンポリマー電池のリサイクルにご協力を



本器に使用しているリチウムイオンポリマー電池は
リサイクル可能な資源です
廃棄する場合は、お住まいの自治体が定める方法に従
い廃棄してください

- △ 本器を廃棄する場合
完全に作動しなくなるまで
電池を放電させること
- △ 完全に作動しなくなったことを
確認すること

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、この取扱説明書をよくお読みいただき
下記の点をもう一度チェックしてください
故障の場合は本体の分解などはせずに
お客様相談室にご相談ください

■使用中電源が切れる

最後に電源・モード選択ボタンを操作してから10分経過すると
アラームがビビビと鳴りライトが消灯し電源が自動的にオフになります

■電源がすぐに切れる

電源を入れてから10分以内(通常は10分作動)で
アラームがビビと鳴り、ランプが10回点滅して消灯し
本体の作動が停止する場合は
充電残量が少なくなっている状態ですので充電を行ってください
(P.3-4充電の仕方参照)

■電源が入らない

充電残量がない可能性がありますので充電を行ってください
(P.3-4充電の仕方参照)

■超音波の出力を感じない

超音波は体感がありません
電源・モードボタンを約2秒長押しし
電源を入れた状態で
ヘッド部の中心に少量の
水をのせてください
水滴の上部が山状になれば
超音波は正常に出力しています



■キャップ・ヘッド部が変形している

素材の特性上、変形する場合がありますが性能に問題は
特に気になる場合は、お客様相談室に交換依頼(有償)をしてください

■キャップ・ヘッド部が変色している

素材の特性上、変色する場合がありますが性能に問題は
特に気になる場合は、お客様相談室に交換依頼(有償)をしてください

取扱説明書ダウンロードの仕方



ダウンロード版は
こちらの
QRコードを
読み取ってください

1. QRコードを読み取ります
2. ご利用上のご注意を
お読みいただき
同意ボタンをタップしてください
3. プルミナスの
取扱説明書を選択し
ダウンロードしてください

商品についてのお問い合わせ
消耗品の交換依頼は下記まで

ジャパングールズお客様相談室
☎ 0120-62-6670
10:00～18:00(土日祝日を除く)
✉ info@mous-beauty.jp
🌐 mous-beauty.jp

修理品のご送付は下記まで

ジャパングールズ メンテナンスセンター
760-0078 香川県高松市今里町1-8-13
☎ 0120-62-6670

発売元 | 株式会社ジャパングールズSC
japangalssc.jp

品質保証書

このたびは、プルミナスをお買い上げいただきありがとうございます。本器は厳重な検査を行い高品質を確保しておりますが、通常のご使用において万一不具合が発生しました場合、保証規定によりお買い上げ後1年間は無償修理いたします。

※本器の保証は、日本国内でご使用になる場合に限りです。

This warranty is valid only in Japan.

品 名 プルミナス

型 番 mous-16418

製品 No.

TEL

お名前

ご住所

※以下につきましては、必ず販売店にて記入捺印をいただいでください。

お買い上げ店名

住 所

TEL

お買い上げ年月日

保証規定

- ①取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理いたします。
- ②本体・充電台・充電用アダプターが保証対象となります。※専用USBコードの断線による故障の場合は保証対象外となります。
- ③無償修理期間内に故障して修理を受ける場合は、商品に本書を添えてお客様相談室にご依頼ください。なお、送料はご負担願います。
- ④無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - ③火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変による故障および損傷。
 - ④本書の提示が無い場合。
 - ⑤本書に記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑥消耗部品。
 - ⑦故障の原因が本製品以外に起因する場合。
- ⑤本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- ⑥この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。無償修理期間経過後の修理等については有償といたします。
- ⑦保証書に記載された個人情報、対象製品の保守サービス・安全点検を実施する目的以外には使用いたしません。